


NSR-4E

stół rehabilitacyjny 4-częściowy elektryczny

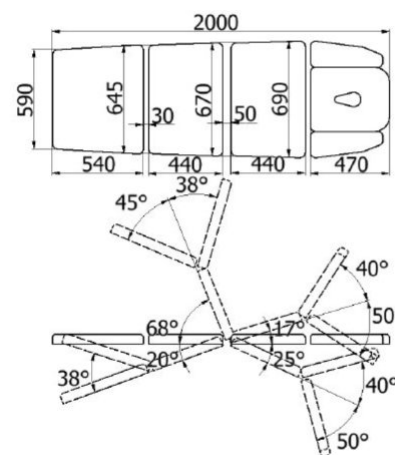

Stół rehabilitacyjny NSR-4E do terapii lub masażu i technik manualnych z leżem łamanym do pozycji Pivota i funkcją fotela. Wyposażony w elektryczną regulację wysokości przewodowym pilotem ręcznym lub nożnym (opcja), a także z ramy sterującej wokół stołu (opcja). Wykonany na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo. Stół rehabilitacyjny posiada 4-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym w zakresie +/- i wyposażonym w opuszczane podłokietniki. Regulacje poszczególnych segmentów leża odbywają się sprężynami gazowymi. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka wysokiej jakości pokryta tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Zagłówek wyposażony jest w otwór do oddychania z zatyczką. Podstawa stołu rehabilitacyjnego posiada w standardzie podgumowane stopki z możliwością stabilizacji i poziomowania stołu, w opcji dodatkowej dostępne są dwa systemy kół opuszczanych do wyboru. Stół można doposażyć w wyposażenie dodatkowe opisane poniżej.

Stół rehabilitacyjny NSR-4E jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Wyposażenie standardowe


- przewodowy pilot ręczny do sterowania regulacją wysokości
- atestowana tapicerka z palety Standard Line
- konstrukcja ramy stołu w kolorze białym z połyskiem
- podstawa na podgumowanych stopkach z regulacją

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- bezprzewodowy pilot ręczny do sterowania regulacją wysokości
- przewodowy pilot nożny do sterowania regulacją wysokości
- rama wokół stołu do sterowania regulacją wysokości
- banany stabilizujące
- pokrowiec wielokrotnego użytku zakładany na sekcję zagłówka w pozycji fotela
- zintegrowany ze stołem wieszak na podkłady higieniczne w rolkach
- system opuszczanych kół z hamulcem
- tapicerka z palety EXCLUSIVE Line
- konstrukcja ramy stołu w jednym z pozostałych kolorów dostępnej palety lub w innym kolorze zadysponowanym przez Klienta (w uwagach do zamówienia należy podać nr koloru wg palety RAL)

Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.

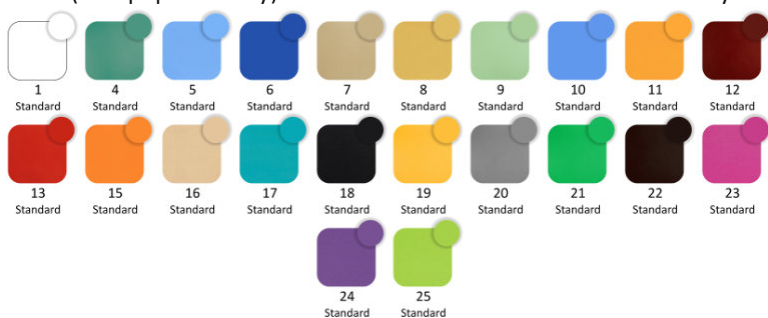

Parametry: grubość 0,85 ±0,15 mm | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2,5 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - paleta EXCLUSIVE Line

Winyłowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwami handlowymi kolekcji Silvertex i Diamante. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Odporny na promieniowanie UV.



Parametry: gramatura: 685 g/m² | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

Surowce: powłoka - winyl 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 210x80cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	NSR 4 E
Przeznaczenie stołu	rehab. masaż badania i zabiegi
Model stołu (seria)	NSR
Leże - liczba sekcji	4 sekcje
Konstrukcja ramy stołu	prostokątna
Długość leża	200 cm
Szerokość leża	69 cm
Wysokość - zakres regulacji	55-80 cm
Regulacja wysokości	elektryczna
Rama sterująca wysokością	opcja dodatkowa
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Pozycja Pivota	Tak
Funkcja fotela	Tak
Pozycja Trendelenburga	Tak
Pozycja antyTrendelenburga	Tak
Podłokietniki w zagłówku	w standardzie
System jezdny	4 koła opcja dodatkowa
Sposób regulacji wysokości	silowniki elektryczne
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Pilot ręczny bezprzewodowy	opcja dodatkowa
Pilot nożny przewodowy	opcja dodatkowa
Regulacja wysokości ramą wokół stołu	opcja dodatkowa
Podłokietniki w zagłówku	w standardzie 2 podłokietniki opuszczane ręcznie
Podparcia boczne pod ręce	opcja dodatkowa: obustronne, regulowane podparcia boczne w sekcji piersiowej stanowiące podłokietniki

	po ustawieniu leża w pozycji fotela
Długość sekcji zagłówka (cm)	47
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji zagłówka	-50° do +40°
Długość sekcji piersiowej (cm)	44
Długość sekcji lędźwiowej (cm)	44
Sposób regulacji sekcji lędźwiowej	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji sekcji lędźwiowej	-20° do +68°
Sposób łamania leża w cz. środkowej	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres łamania leża w cz. środkowej	-25° do +17°
Długość sekcji podnóżka (cm)	54
Sposób regulacji sekcji podnóżka	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji sekcji podnóżka	-45° do +38°
Sposób regulacji do pozycji Trendelenburga	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga	-25° do 0°
Sposób regulacji do pozycji antyTrendelenburga	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji pozycji antyTrendelenburga	0-25°
Podgrzewanie leża	Nie
Otwory w leżu	1 otwór w zagłówku
Zasłepki do otworów w leżu	w standardzie
Relingi do pasów stabilizacyjnych	obustronne w sekcji lędźwiowej
Wieszak na podkłady w rolce	zintegrowany wieszak na podkłady higieniczne w rolkach - opcja dodatkowa
System jezdny - typ	system kół opuszczanych - opcja dodatkowa centralna blokada kół - opcja dodatkowa
Zasilanie	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu (kg)	85

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>